

Discofix® C

Der arzneimittelbeständige Dreiwegehahn mit Rotationsadapter



Infusionszubehör

DEHP-frei

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE


Machen Sie keine Zugeständnisse ...



Kennen Sie die Situation?

Undichtigkeiten an Dreiwegehähnen stören die Infusionstherapie und können Ihre Patienten gefährden. Es kann zu einer Unterversorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten, Luftembolien oder mikrobiellen Kontaminationen kommen.

B. Braun bietet als einziger Hersteller einen arzneimittelbeständigen Dreiwegehahn an, der über die gesamte Standzeit des Infusionsregimes den Lösungsfluss zuverlässig steuert. Dies wurde durch eine unabhängige Prüfung des TÜV München bestätigt.

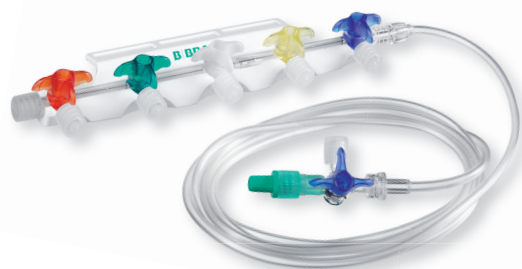

Eine neue Generation von Dreiwegehähnen und Hahn- bänken erfüllt die Anforderungen einer fortschrittlichen Infusionstherapie

Discifix® C – eine Kombination aus innovativem Material und mehr als 20 Jahren Erfahrung von B. Braun. Die Spannungsrisssbeständigkeit des Discifix® C unter Einwirkung der verschiedenen heute verwendeten Arzneimittel ist einzigartig.

Discifix® C – komfortable Handhabung und herausragende Sicherheit gehören zusammen

Ob beim Anschluss eines Dreiwegehahnes an eine Venenverweilkanüle, einen zentralvenösen Katheter oder als Verbindung mit einem Infusionssystem – alle Konnektionen und Befestigungen können Sie zeitsparend und einfach durchführen.

... fordern Sie den spannungsrisssbeständigen Dreivegehahn




Discofix® C – einzigartiger Handhabungskomfort und ein Plus an Sicherheit

Ob bei der Konnektion des Dreivegehahnes an eine Venenverweilkanüle oder an einen zentralvenösen Katheter, ob bei der Integration einer Hahnbank in ein Infusionssystem – wichtig ist vor allem, dass alle Verbindungen und Einstellungen leicht und schnell vorgenommen werden können. Bei allen Handhabungsvorgängen müssen Sie sich auf eine sichere, dichte Verbindung verlassen können. Diese Anforderungen wurden im Design von Discofix® C umgesetzt.

Ihre Vorteile im Überblick

- Arzneimittelbeständiger Dreivegehahn – für mehr Sicherheit in der Infusionstherapie
- Undichtigkeiten und die daraus möglicherweise resultierenden Gefährdungen für Patient und Anwender werden verhindert
- Schnelle und sichere Konnektionen – zuverlässige Verbindung auch bei langfristiger Anwendung
- Problemloser Zugang durch den Rotationsadapter bei Injektionen und Aspirationen
- Der Klick-Mechanismus – spürbares Einrasten und exakte Positionierung des Kükens in 45°-Position

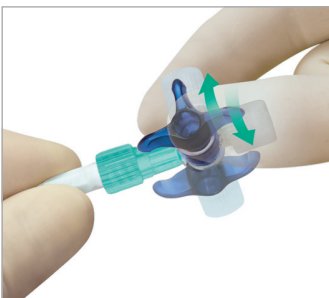

Die drehbare Lock-Überwurfmutter ermöglicht eine schnelle und einfache Konnektion und gewährleistet eine zuverlässige und sichere Systemverbindung.






Nach erfolgter Konnektion bleibt der Discofix® C-Hahn durch den Rotationsadapter um seine eigene Achse drehbar. Damit werden Injektionen und Aspirationen spürbar leichter durchgeführt, da Sie den Dreivegehahn in die günstigste Position drehen können. Ein unbeabsichtigtes Lösen der Überwurfmutter wird verhindert.



Nutzen Sie die deutlich spürbare Klick-Funktion in 45°-Schritten für die exakte und komfortable Einstellung des Dreivegehahnes.

„Sicherheit wird spürbar – bis in die Fingerspitzen.“

Discofix® C: Ihre erste Wahl

| Produktprogramm | Ausführung | Verkaufseinheit/ Stück | Art.-Nr. |
|---|--|---------------------------|----------|
|  | Dreiwegehahn, blau, mit Rotationsadapter | 200 | 16494 C |
| | Dreiwegehahn, weiß, mit Rotationsadapter | 200 | 16495 C |
| | Dreiwegehahn, rot, mit Rotationsadapter | 200 | 16496 C |
| | Dreiwegehahn, gelb, mit Rotationsadapter | 200 | 16497 C |
|  | Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 10 cm | 200 | 16500 C |
| | Dreiwegehahn, weiß, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 10 cm | 200 | 16501 C |
| | Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 25 cm | 50 | 16520 C |
| | Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 50 cm | 50 | 16540 C |
| | Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 75 cm | 50 | 16551 C |
| | Dreiwegehahn, blau, mit Verbindungsleitung und Rotationsadapter, 100 cm | 50 | 16560 C |
|  | Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril | 50 | 16605 C |
| | Hahnbank 3-fach, b/g/r, einzeln steril | 50 | 16600 C |
| | Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung, 150 cm | 50 | 16615 C |
| | Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung und endständigem Dreiwegehahn, 150 cm | 50 | 16610 C |
| | Hahnbank 3-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung und endständigem Dreiwegehahn, 180 cm | 50 | 16611 C |
|  | Hahnbank 5-fach, blau, einzeln steril | 40 | 16609 C |
| | Hahnbank 5-fach, r/gr/w/g/b, einzeln steril | 40 | 16608 C |
| | Hahnbank 5-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung, 150 cm | 40 | 16612 C |
| | Hahnbank 5-fach, blau, einzeln steril mit Verlängerung und endständigem Dreiwegehahn, 150 cm | 40 | 16613 C |

Latexfrei – DEHP-frei